

NARKOTESTI D4D KASUTUSJUHEND.

Testi pakendist leiate lisaks juhendile plastikust testpulga ning 2 testpaberit.




Võtke testpaberiga (eemaldades esmalt kaitsepaber) näidist testitavate pindadelt (kahtlane aine, või mistahes pind, mida on puudutanud testitav isik või millele võib olla olnud kahtlast ainet). Mida rohkematelt pindadelt saate näidise, seda suurem on esmaavastamise tõenäosus. Näidist tohib võtta ainult kuivalt pinnalt. Näidise saamiseks hõõruge testpaberi seda külge, millele ei ole trükitud numbreid, vastu testitavat pinda.



Vajutage sõrmede vahel katki testpliatsis sisalduv ampull.



Eemaldage testpliatsilt kork ning tilgutage selles sisalduvat vedelikku testpaberile. Testpliatsis sisalduvat ainet jätkub mõlema testpaberi jaoks.

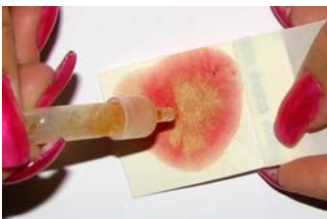

Oodake kuni 90 sekundit. Kui testpaberile ilmub erinevaid värvitoone peale täielikult ühtlase kollaka tooni, võrreldes ilmuvat värvitooni juhendis toodud näidistega, leidmaks missuguse narkootilise aine jälgi test tuvastas.

Teise testpaberiga saate sooritada kas kontrolltesti või teise testi teistelt pindadelt. Peale testpliatsi pakendist eemaldamist ning selles sisalduva ampulli purustamist saab testi kasutada maksimaalselt 1 tunni jooksul. Kõik tulemused, mida saate pärast 1 tunni möödumist alates testpliatsi aktiveerimisest, võivad olla juhuslikud ja tähenduseta.

D4D test võimaldab tuvastada järgmisi narkootikume:

Kanep, Amfetamiin, PCP, Mehamfetamiin (s.h. Ecstasy), Ketamiin, Heroiin, Metadoon, LSD, HCL (Buprenofiin), Oopium

Narkotest on mõeldud ennetavavaks vahendiks mis võimaldab vajadusel ilma testitava isiku otsese osaluseta tuvastada narkootiliste ainete füüsilist olemasolu ja seega ka testitava isiku füüsilist kokkupuudet nendega. Käesolev narkotest ei ole meditsiiniseade, ei nõua kasutamiseks ei meditsiinilist haridust ega ka uriini, sülje, juuste ega mistahes teiste otse inimese küljest pärinevate näidismaterjalide võtmist. Antud test võimaldab 90 sekundi jooksul tuvastada narkootiliste ainete mikroosakeste olemasolu asjadel, mida testitav inimene on kas kandnud või katsunud. Nendeks võivad olla näiteks riided, mobiiltelefon, klaviatuur, käekell, mobiiltelefon, kirjutusvahendid vmt. Samuti võimaldab see tuvastada, kas Teie poolt leitud juhuslik aine (pulber, tablett) on narkootilise aine sisaldusega. Test näitab ära ka leitud narkootiliste ainete liigid.

Mis võib viidata narkootikumide ohule?

Ohule viitavad enamasti järgmised tunnused:

Emotsionaalses käitumises:

- Õppeedukuse järsk vähenemine
- Muudatused sõpruskonnas
- Loobumine senistest olulistest tegevusaladest nagu hobidest või spordiga tegelemisest
- Mässumeelne või agressiivne käitumine
- Peresuhete järsk halvenemine
- Depressiivsus, endasse tõmbumine, isoleerumine
- Pidev kaitseisund

Füüsiline

- Pidev väsimustunne
- Punased silmad
- Pidev kõha
- Magamis- ja toitumisharjumuste muutumine
- Sageasend tervisprobleemid
- Segane kõne, värisevad käed, närviline käitumine.

Kui Sa avastad ühegi ülaltoodud sümptomitest, ei tähenda see veel, et testitav eksperimenteerib narkootikumidega, kuid võib olla mõistlik seda sügavamalt uurida.

D4D narkotest on toodetud Iisraelis firma Mistral poolt. Tootja huve esindab Eestis, tegeleb müügi ja tootekoolitusega Rovico Büroo OÜ www.narkotester.com Mustamäe tee 59, Tallinn. Lisainfot saate telefonil 6515070.

ROVICO
Vaid parim on piisavalt hea